


Plum Augen-Notfallstation 4810 in Wandbox mit je 1 DUO Augenspülflasche

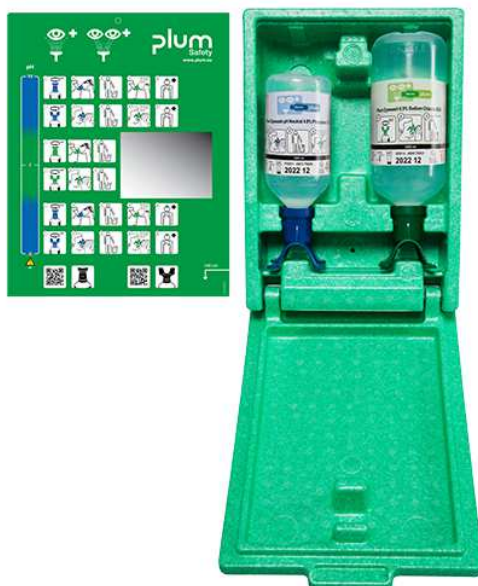

Plum Augen-Notfallstation 4810 für die gleichzeitige Spülung beider Augen in einer staubgeschützten Wandbox. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer DUO Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen Chemikalien oder auch Fremdkörper in das Auge gelangen können.

- PZN-Nr.: 6585289
- Maße Wandstation: (H x B x T): 355 x 250 x 115 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

pH Neutral

Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülflaschen mit 0,9% Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter o. ä.

DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung beider Augen

Mit den Plum Augenspülflaschen DUO wird ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn es können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den speziell entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.

Produkt-Eigenschaften

- Spüldauer ca. 7 Minuten
- einfache Handhabung
- spezieller Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit gewährleistet
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **4810**